




Contour[®] plus ONE[»]

Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

CONTOUR DIABETES mobiilirakenduse abil veresuhkrutaseme jälgimine




Enne raviplaani, toitumis- ja treeningharjumuste muutmist
konsulteerige alati eelnevalt arstiga.

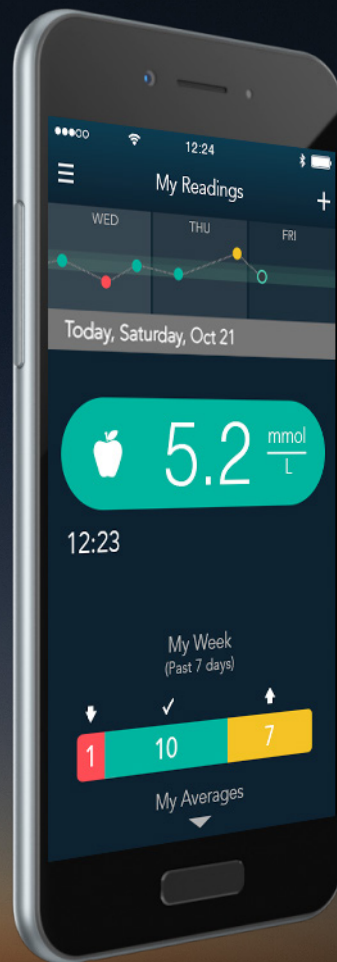

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

“**My Patterns**” funktsioon
tuvastab teie veresuhkrunäitude
mustreid ja seaduspärasusi ja
teavitab teid nende võimalikest
tekkepõhjustest.

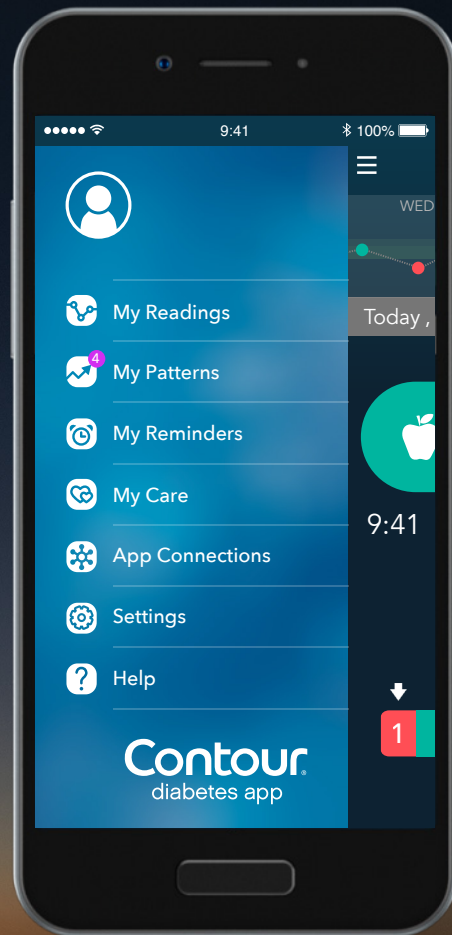


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

1.

Näidumustrid

Kui **CONTOUR DIABETES** rakendus tuvastab veresuhkrunäitudes mustri, kuvatakse teade “**New Pattern Detected**”.

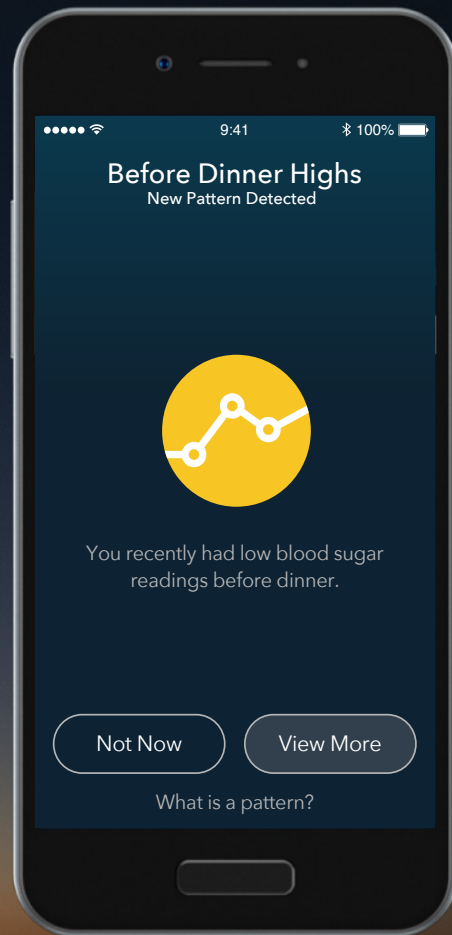


Contour
plus ONE
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

1.

Näidumustrid

Kui **CONTOUR DIABETES rakendus** tuvastab veresuhkrunäitudes mustri, kuvatakse teade “**New Pattern Detected**”.

Toksake “**View more**”, et saada lisainfot.

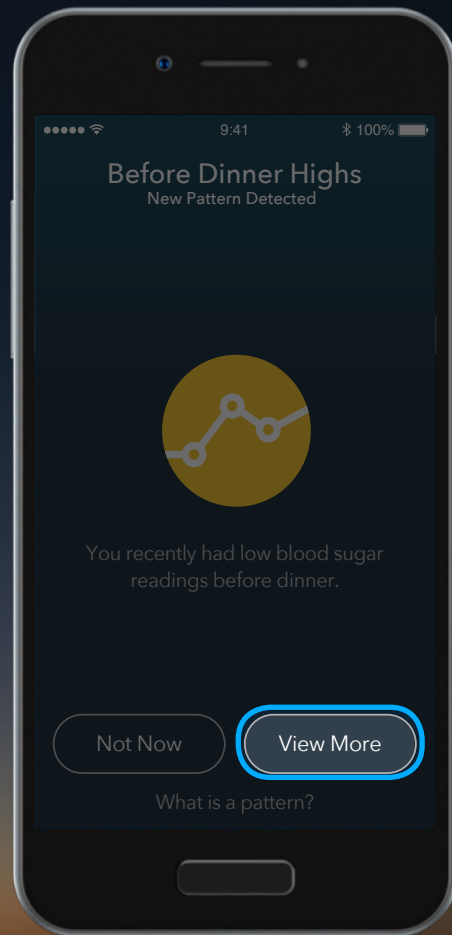


Contour
plus ONE
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

2.

Näidumustrid

“Recent Highs” muster näitab, et viimased kolm veresuhkrunäitu olid üle seatud sihtvahemiku normpiiri.

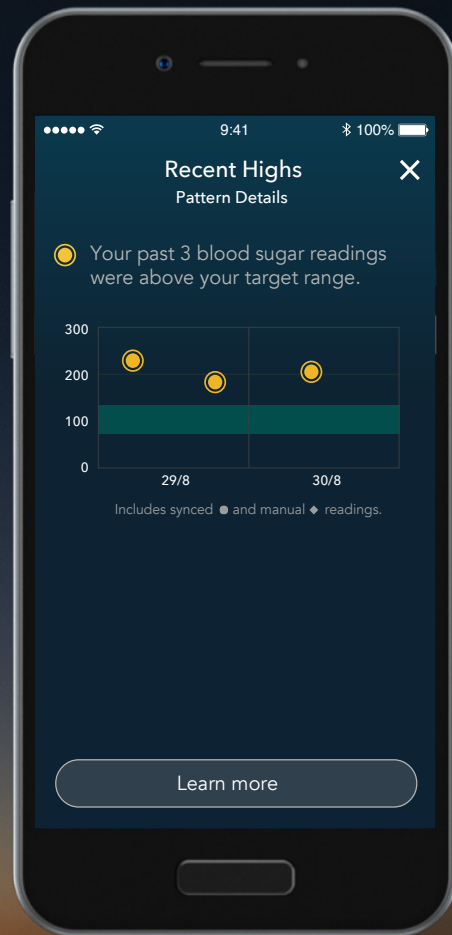

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

2.

Näidumustrid

“Recent Highs” muster näitab, et viimased kolm veresuhkrunäitu olid üle seatud sihtvahemiku normpiiri.

Toksake **“Read More”**, et saada lisainfot võimalike põhjuste kohta.




Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

3.

Näidumustrid


Kui teate kõrge veresuhkrunäidu põhjust, saate selle siin ära märkida.

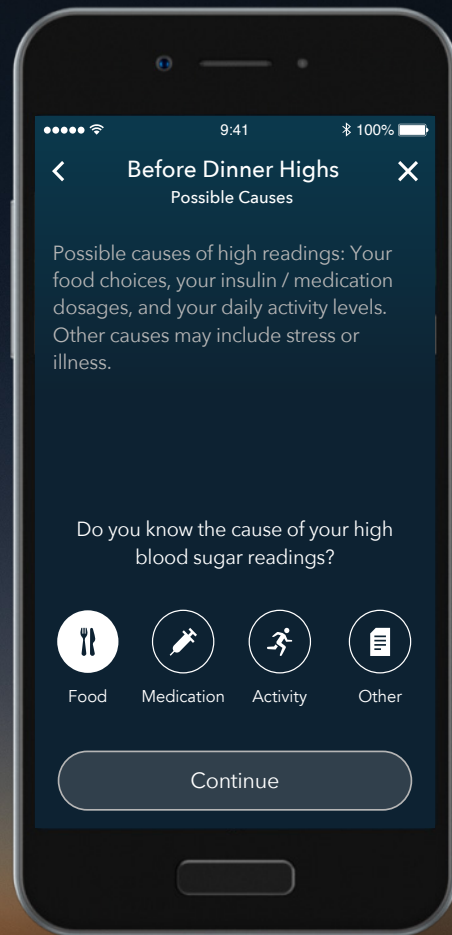

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

3. Näidumustrid

Kui teate kõrge veresuhkrunäidu põhjust, saate selle siin ära märkida.

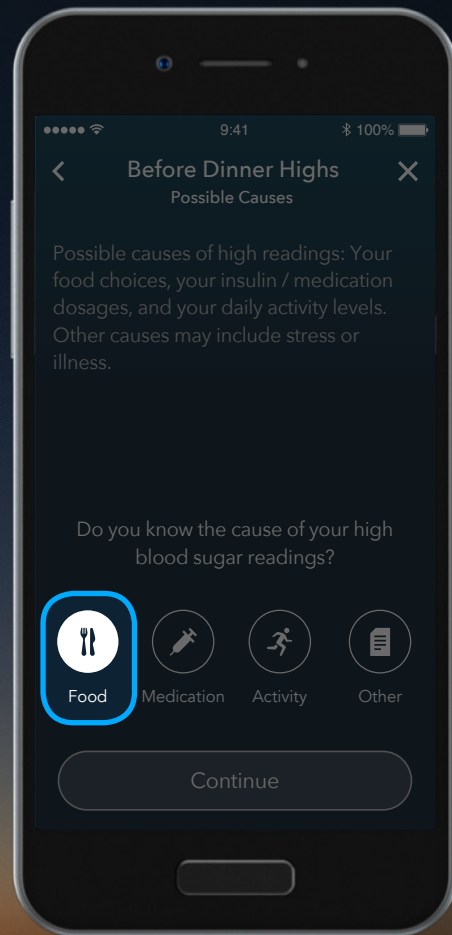


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

4.

Minu näidumustrid

CONTOUR DIABETES rakendus annab infot antud mustri võimalike tekkepõhjuste kohta.

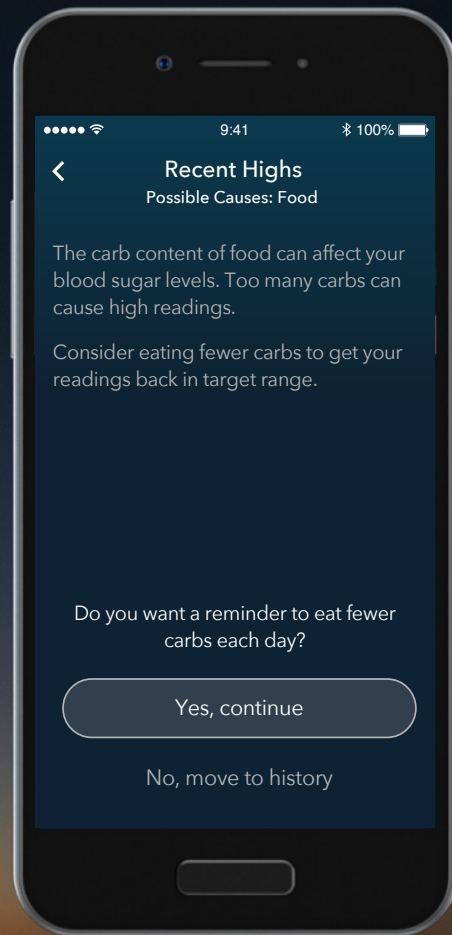


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

4.

Minu näidumustrid

CONTOUR DIABETES rakendus annab infot antud mustri võimalike tekkepõhjuste kohta.


Toksake **“Yes, continue”** seadistamiseks igapäevast meeldetuletust tarbida vähem süsivesikuid.

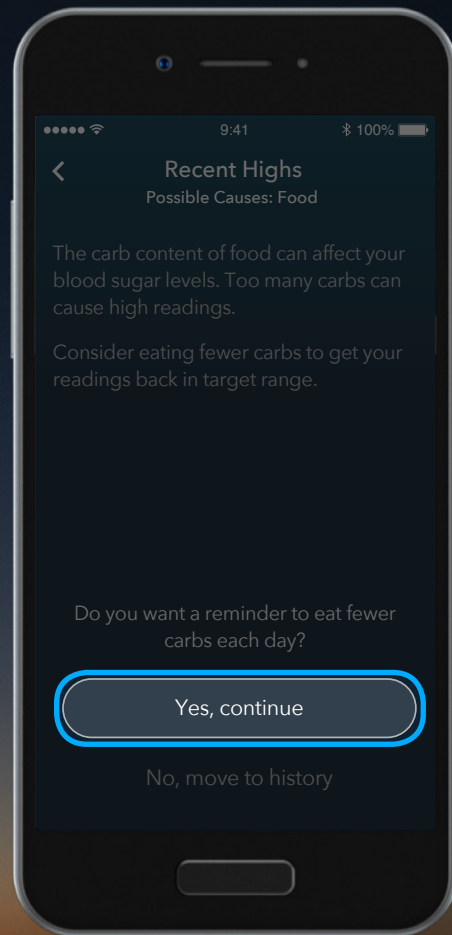

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

5. Minu näidumustrid

Valige sobiv aeg igapäevaseks meeldetuletuseks tarbida vähem süsivesikuid.

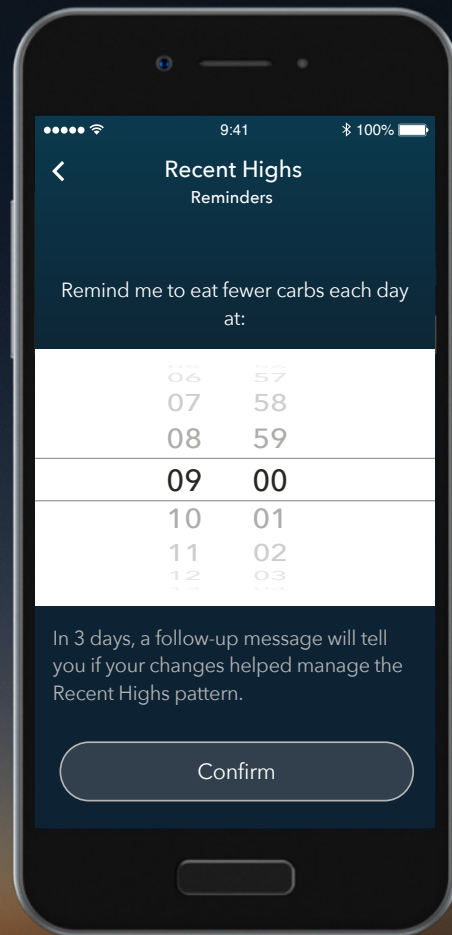


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

5. Minu näidumustrid

Valige sobiv aeg igapäevaseks meeldetuletuseks tarbida vähem süsivesikuid.

Seadistuse kinnitamiseks toksake **“Confirm”**.

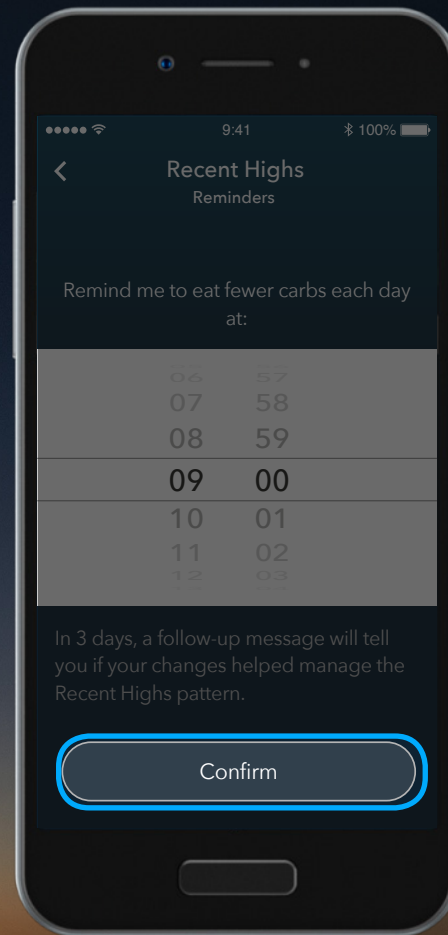


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

6.

Näidumustrid

Valitud ajal ilmub ekraanile meeldetuletus.

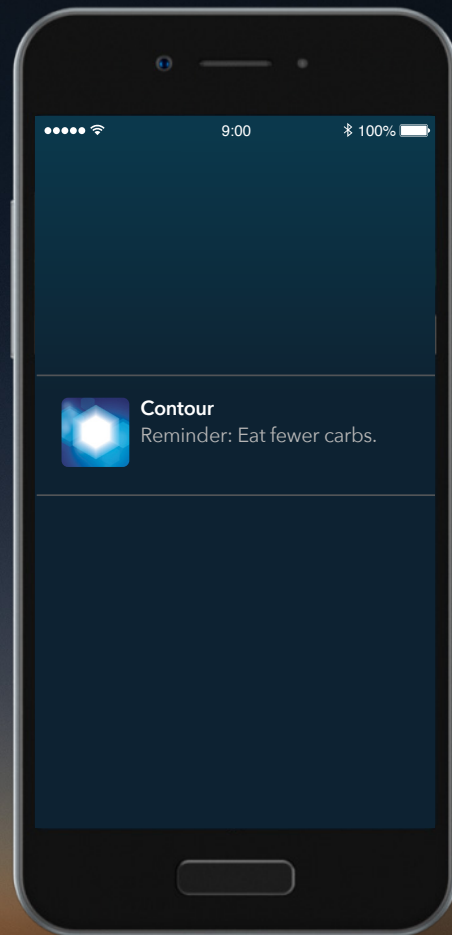


Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

6.

Näidumustrid


Valitud ajal ilmub ekraanile meeldetuletus.

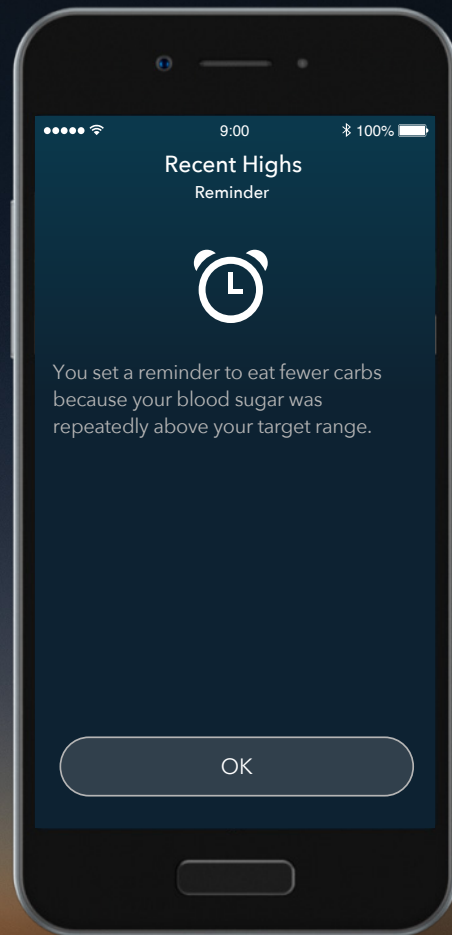

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

7. Minu näidumustrid

Kolme päeva pärast annab rakendus märku, kas tehtud muudatused aitasid antud **näidumustrit** parandada.

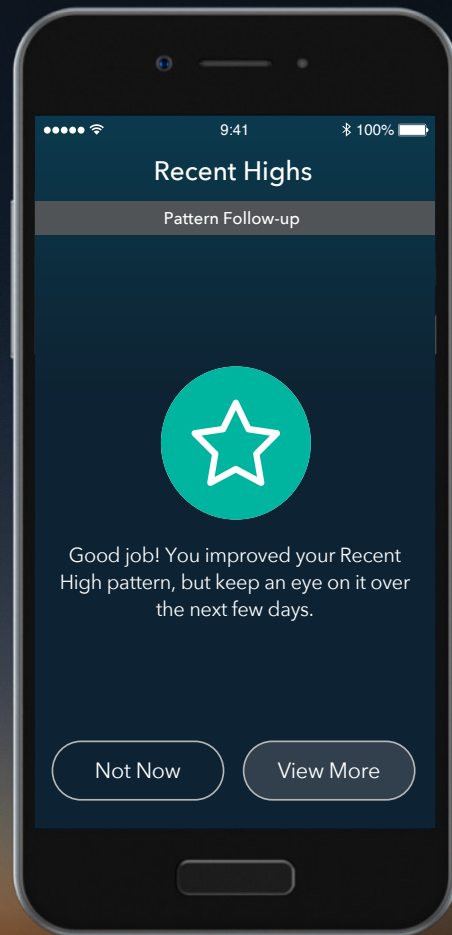


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

7. Minu näidumustrid

Kolme päeva pärast annab rakendus märku, kas tehtud muudatused aitasid antud **näidumustrit** parandada.


Lisainfo saamiseks valige **“View More”**.

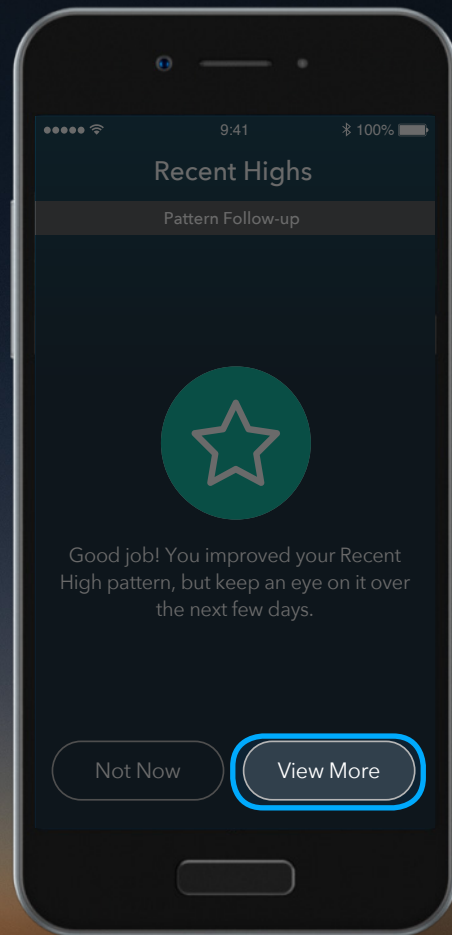

Contour
plus ONE
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

7. Näidumustrid


Muster talletatakse ja seda on võimalik igal ajal vaadata valides **“Main Menu”** - **“My Patterns”**.

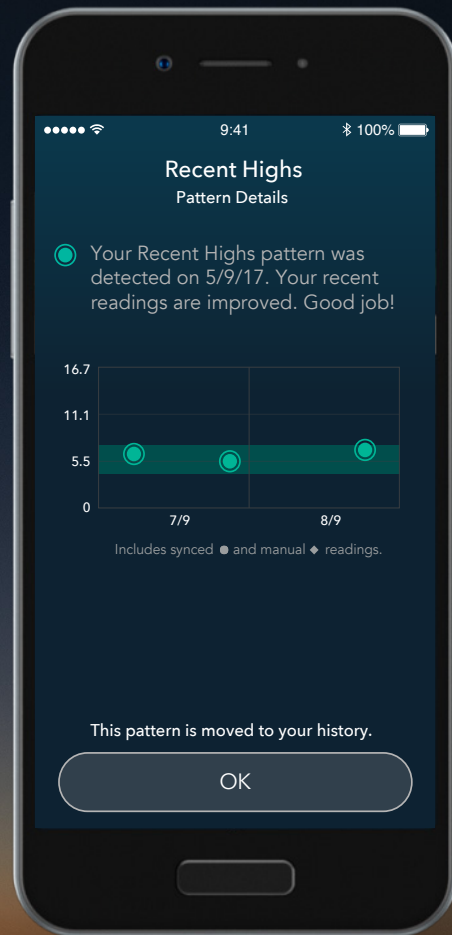

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

8. Näidumustrid


Teil on igal ajal ligipääs oma näidumustritele alamenüüs **“Pattern History”**, kuhu saate lisada märkmeid mustri võimalike tekkepõhjuste kohta pakkudes seeläbi lisainfot teie tulevaste arstivisiitide tarvis.

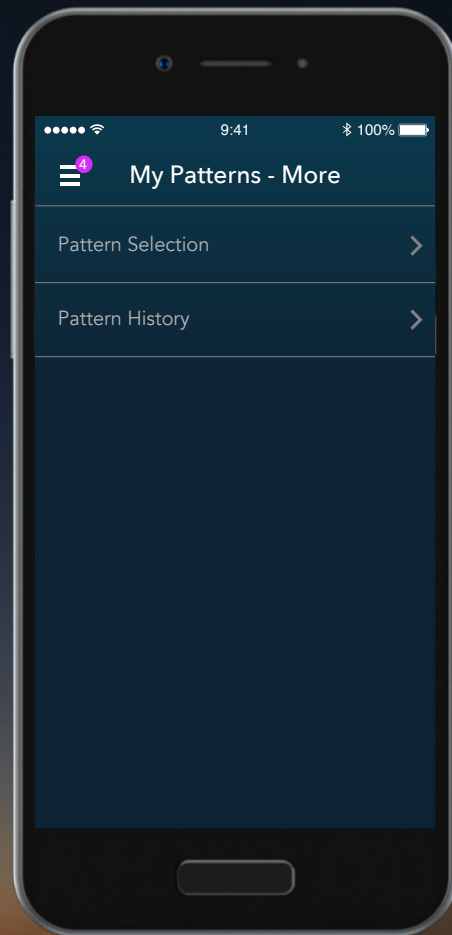

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

8. Näidumustrid

Teil on igal ajal ligipääs oma näidumustritele alamenüüs **“Pattern History”**, kuhu saate lisada märkmeid mustri võimalike tekkepõhjuste kohta pakkudes seeläbi lisainfot teie tulevaste arstivisiitide tarvis.

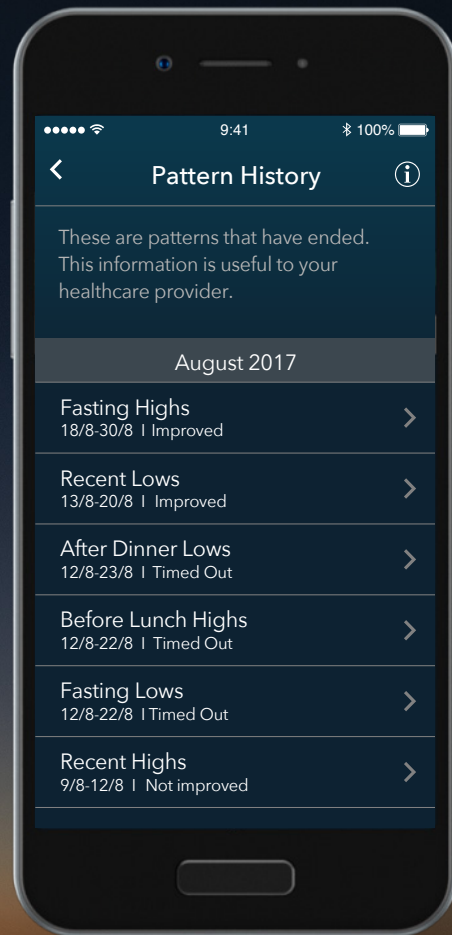

Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

Kui teil tekib küsimusi **CONTOUR PLUS ONE** nutika glükomeetri või Contour Diabetes rakenduse kohta, siis konsulteerige arstiga. Lisainfot toodete kohta leiate kasutusjuhendist.

Lisainfot toodete ja nende kättesaadavuse kohta teie riigis leiate veebiaadressilt **diabetes.ascensia.com**.



Esitatud patsiendiandmed on näitlikud.


Konsulteerige alati perearstiga enne raviplaan, toitumis- või treeningharjumuste muutmist.



Apple ja Apple logo on Ameerika Ühendriikides ja mujal registreeritud Apple Inc. kaubamärgid. Apple Store on Apple Inc. registreeritud teenusmärk.

Bluetooth sõnatahis ja logo on Bluetooth SIG Inc. registreeritud kaubamärgid, mille kasutamine on litsentseeritud. Google Play ja Google Play logo on Google Inc. registreeritud kaubamärgid.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo ja Contour on Ascensia Diabetes Care Holdings AG registreeritud kaubamärgid.

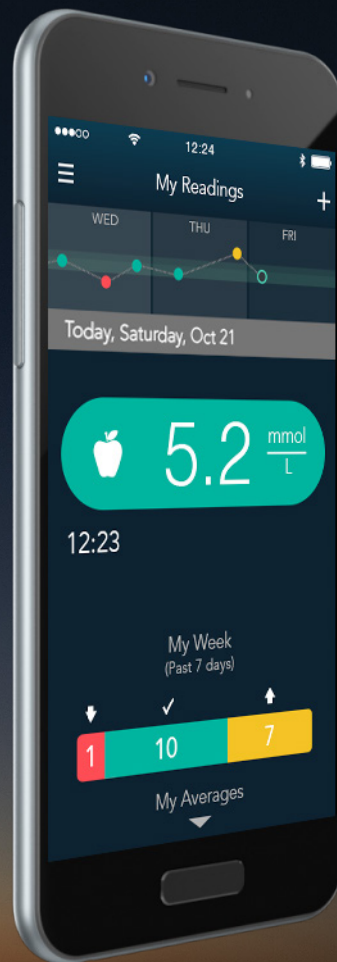

Contour
plus ONE
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

