




Contour[®] plus ONE[»]

Система вимірювання
рівня глюкози в крові

Перегляд профілів результатів рівня глюкози крові із **ДОДАТКОМ** **CONTOUR® DIABETES**




Завжди консультуйтеся з Вашим лікарем до того, як змінювати лікування, дієту або фізичну активність.

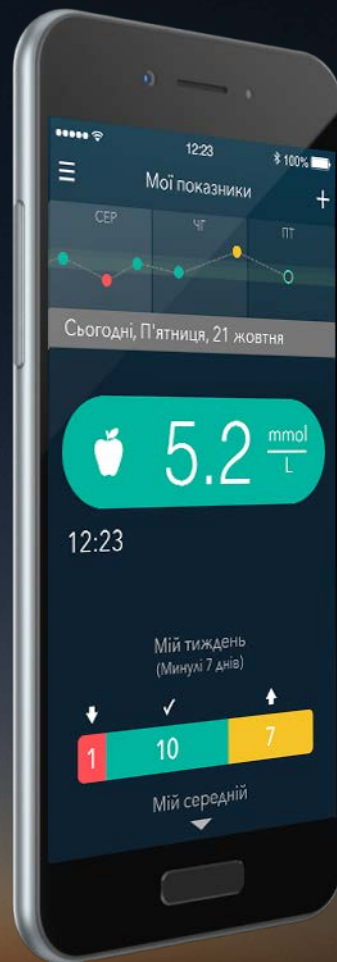

Contour
plus ONE
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


Функція **Мої Профілі результатів** виявляє конкретні профілі та тренди Ваших показників глюкози крові та повідомлює Вам про їх можливі причини.

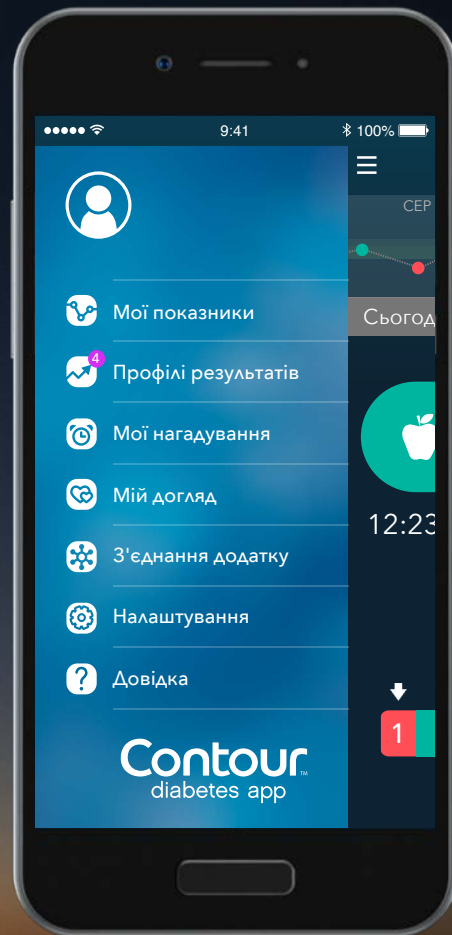

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
різень глюкози в крові

1. Профілі результатів

Коли **додаток**
CONTOUR®DIABETES
помічає профіль результатів,
Ви отримаєте повідомлення
Помічено Новий Профіль
результатів.

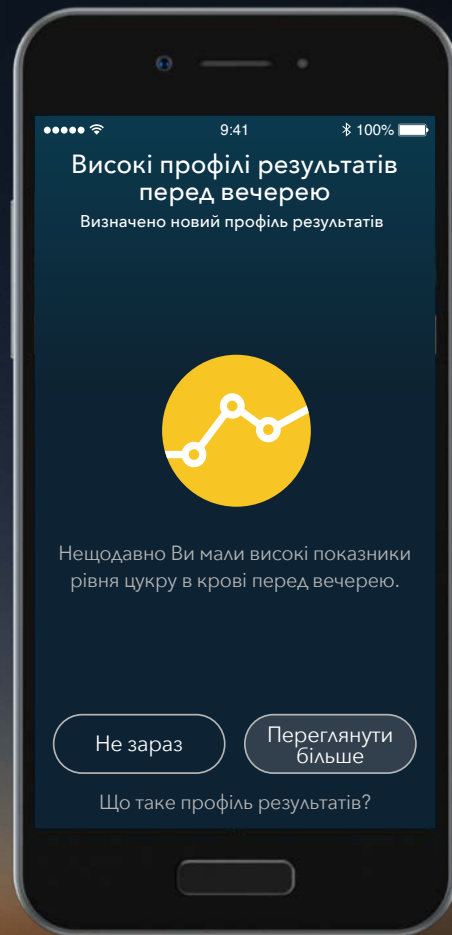


Contour
plus ONE
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

1. Профілі результатів

Коли **додаток CONTOUR®DIABETES** помічає профіль результатів, Ви отримаєте повідомлення **Помічено Новий Профіль результатів.**


Торкніться **Детальніше** щоб дізнатись більше про профіль результатів.

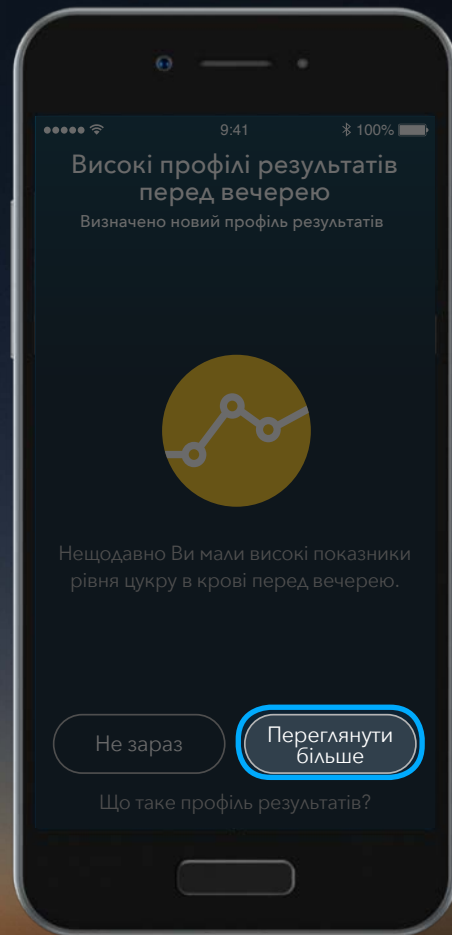

**Contour
plus ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

2. Профілі результатів

Профіль результатів
Недавні високі говорить, що
останні 3 результати були
вище Вашого цільового рівня.

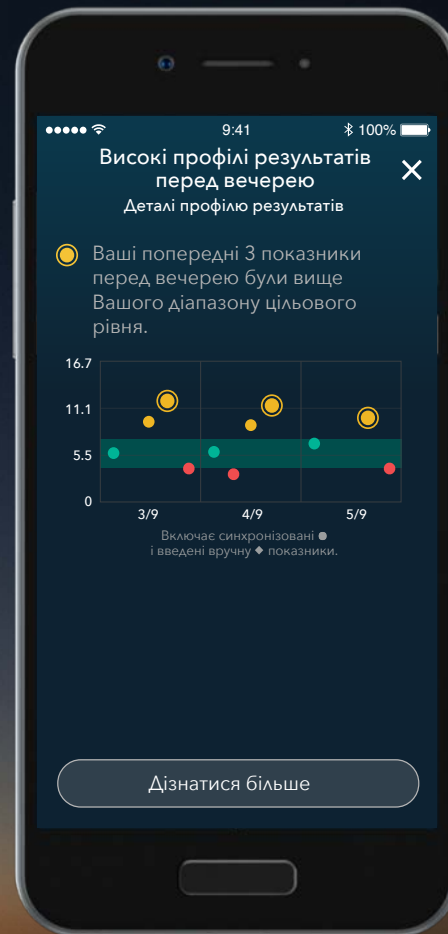


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

2. Профілі результатів

Профіль результатів
Недавні високі говорить, що
останні 3 результати були
вище Вашого цільового рівня.


Торкніться **Дізнатись більше**,
щоб прочитати про можливі
причини.

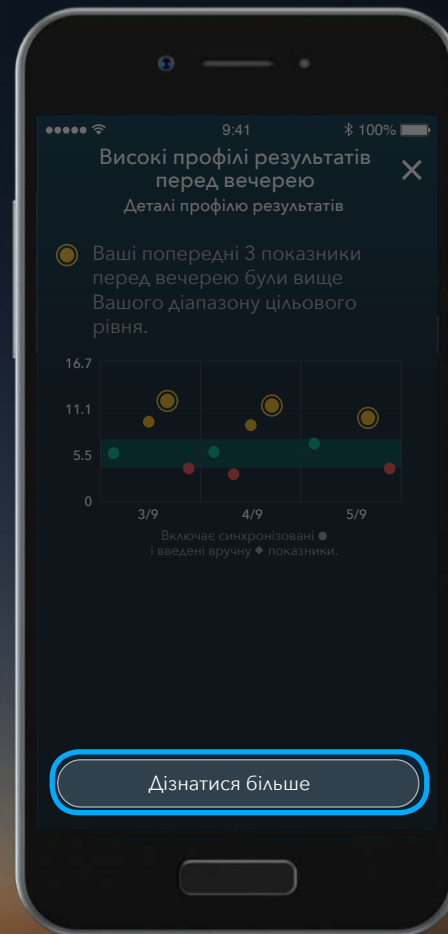

Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

3. Профілі результатів


Якщо Ви знаєте причину високих показників рівня цукру, Ви можете вибрати її тут.

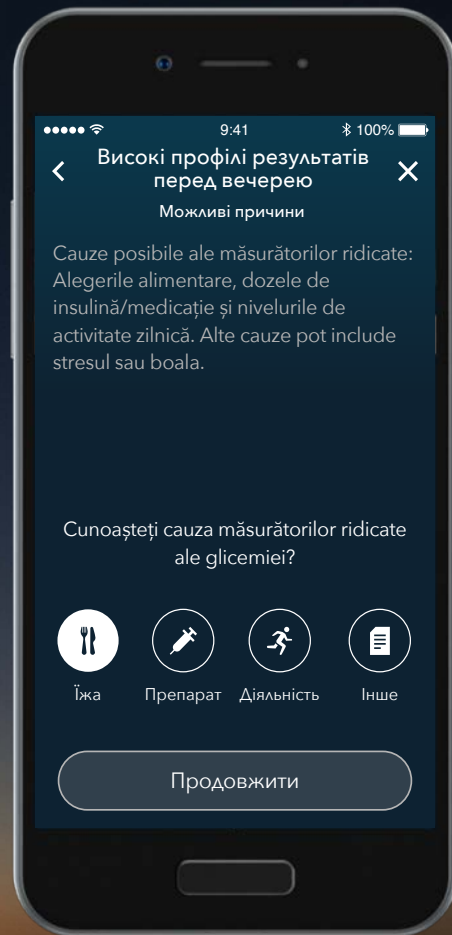

Contour[®]
plus ONE[»]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


3. Профілі результатів

Якщо Ви знаєте причину високих показників рівня цукру, Ви можете вибрати її тут.

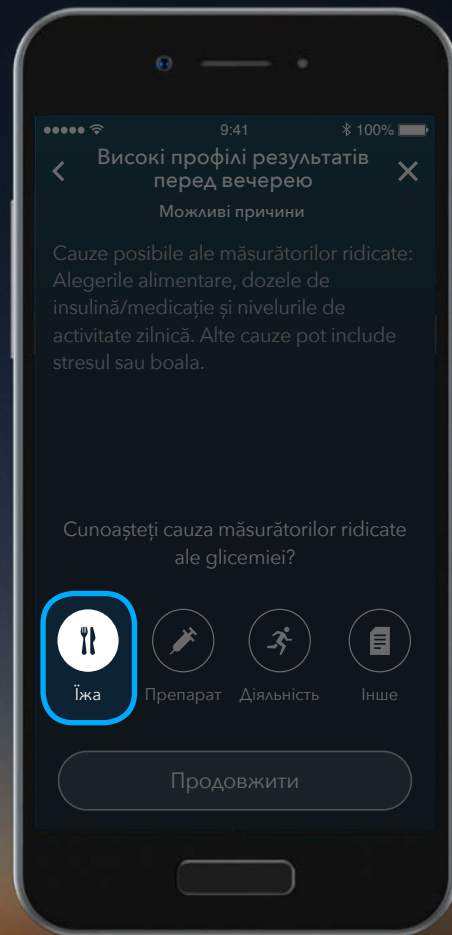


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

4. **Мої Профілі результатів**
Додаток CONTOUR®DIABETES
надає деяку інформацію
щодо можливої причини цього
профіля результатів.

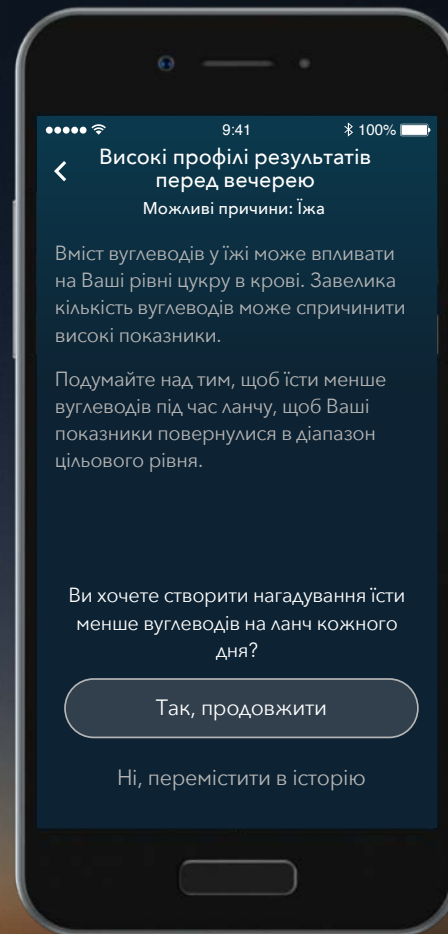

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


4. **Мої Профілі результатів**
Додаток CONTOUR®DIABETES
надає деяку інформацію
щодо можливої причини цього
профіля результатів.
Торкніться **Так, продовжити**,
щоб встановити нагадування
їсти менше вуглеводів щодня.

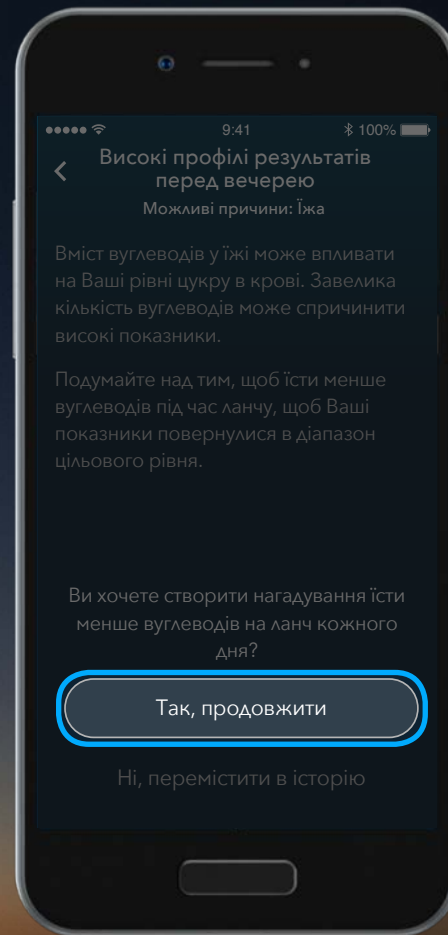

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

5. Мої Профілі результатів

Скористайтесь колесом, щоб вибрати час, коли отримати нагадування їсти менше вуглеводів щодня.

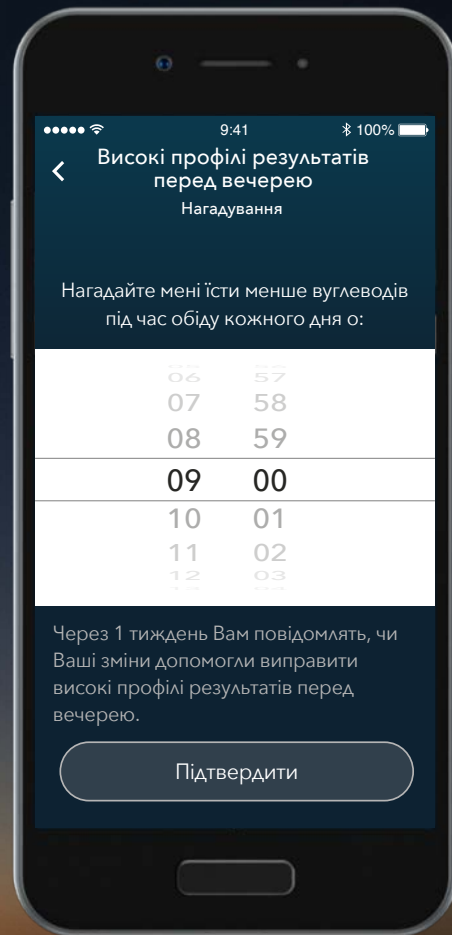


Contour[®]
plus ONE[»]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

5. Мої Профілі результатів

Скористайтесь колесом, щоб вибрати час, коли отримати нагадування їсти менше вуглеводів щодня.


Торкніться **Підтвердити**, щоб встановити час.

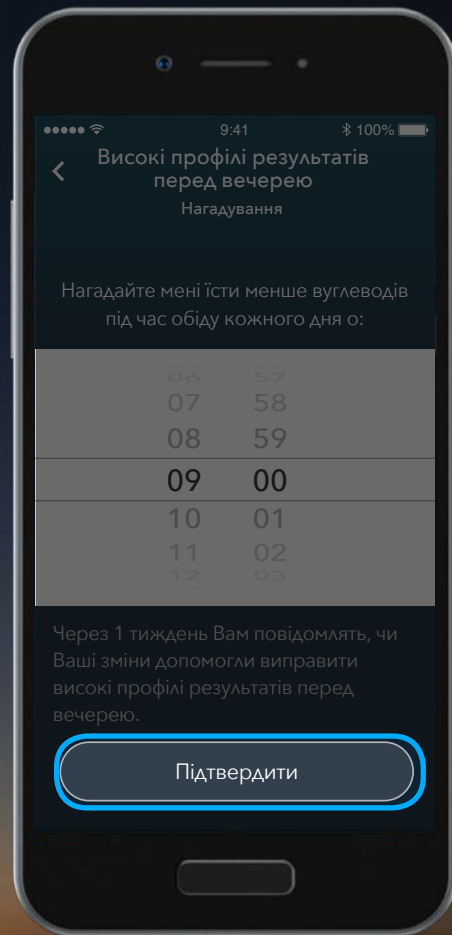

Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

6. Профілі результатів


В обраний Вами час нагадування з'явиться на екрані.

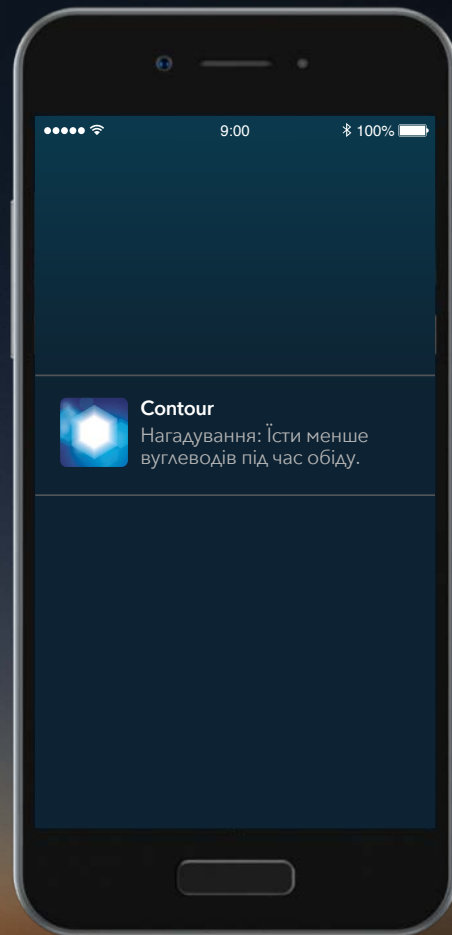

Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

6. Профілі результатів


В обраний Вами час нагадування з'явиться на екрані.

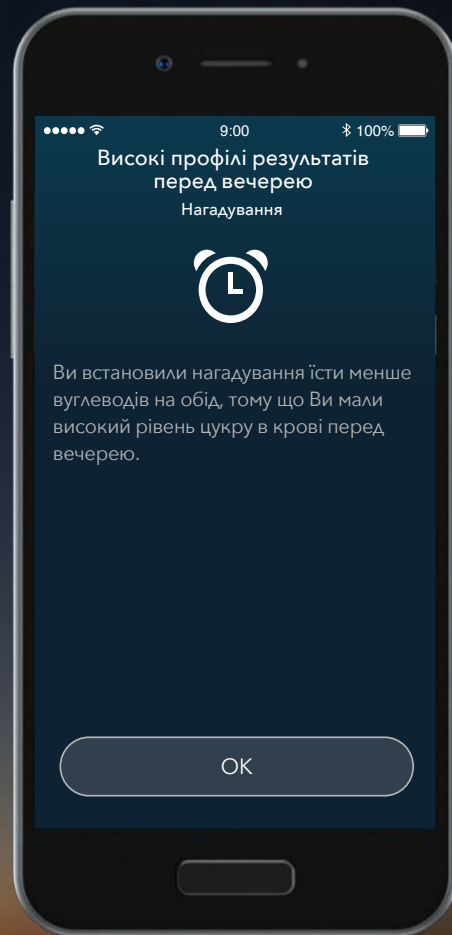

Contour[®]
plus **ONE**»
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

7. **Мої Профілі результатів**

Через 3 дні повторне нагадування сповістить Вас, чи змінився профіль результатів **Недавні Високі**.

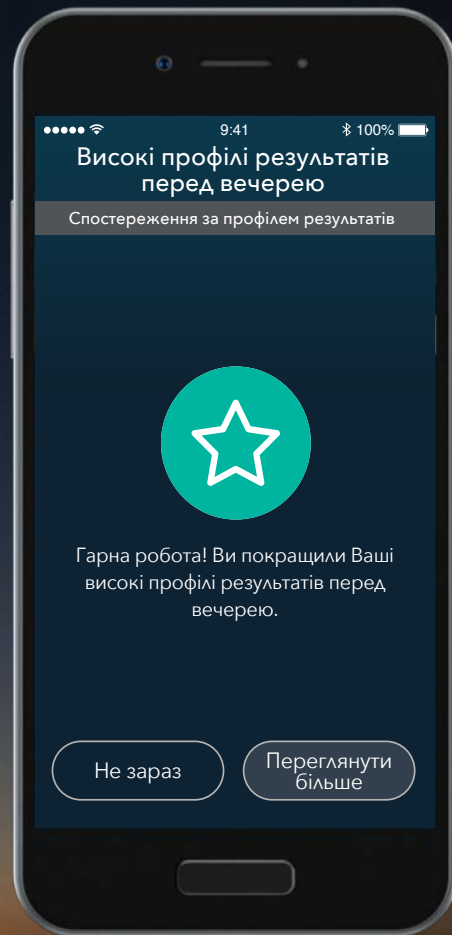


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

7. **Мої Профілі результатів**

Через 3 дні повторне нагадування сповістить Вас, чи змінився профіль результатів **Недавні Високі**.


Торкніться **Детальніше**, щоб дізнатись більше.

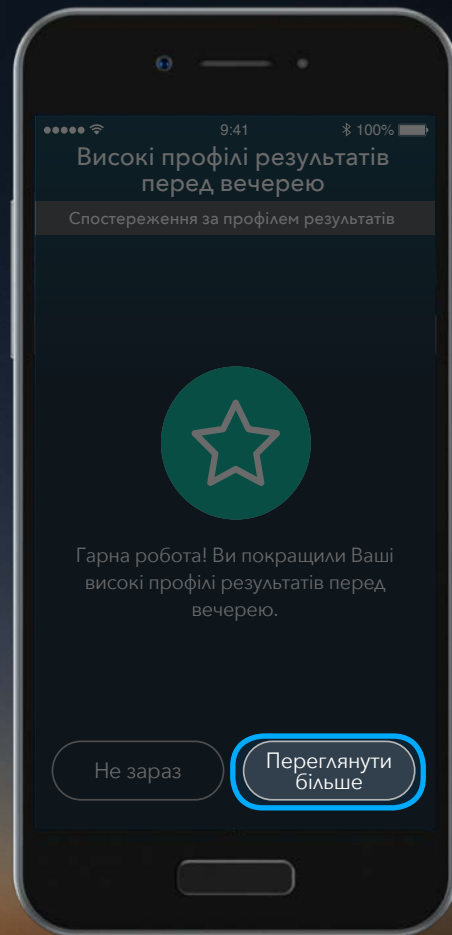

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


7. Профілі результатів

Цей профіль результатів перенесено до Вашої історії, його можна подивитись у будь-який час, обравши **Мої Профілі результатів** з **Головного Меню**.

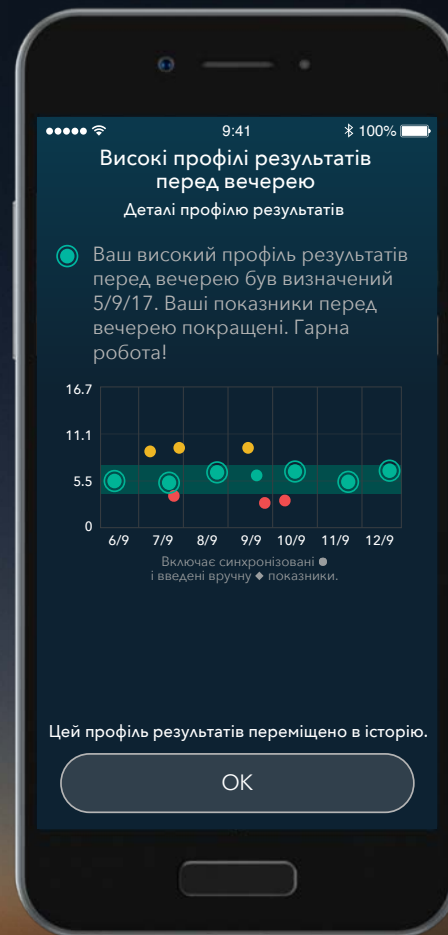

8. Профілі результатів


У будь-який час Вам доступні Ваші профілі результатів у **Історії Профілів результатів**, щоб додати примітки про можливі причини цього профіля результатів, що може допомогти Вам у майбутніх візитах до Вашого лікаря.

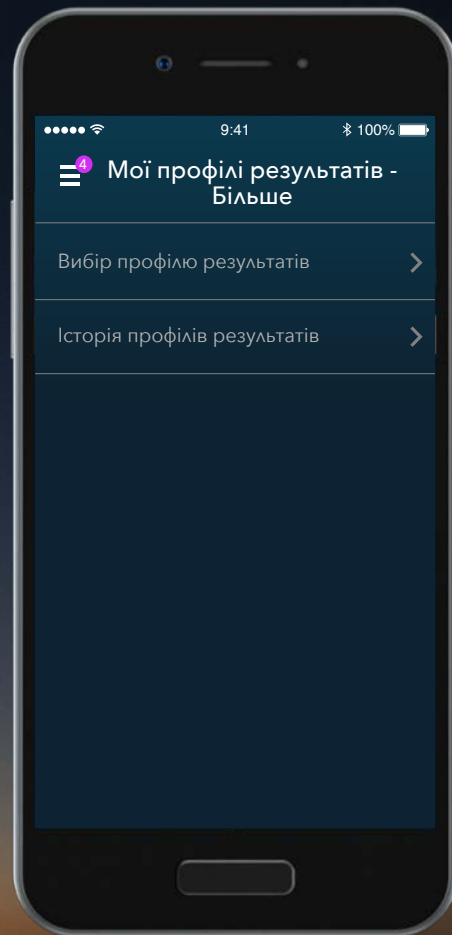

Contour
plus ONE
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

8. Профілі результатів

У будь-який час Вам доступні Ваші профілі результатів у **Історії Профілів результатів**, щоб додати примітки про можливі причини цього профіля результатів, що може допомогти Вам у майбутніх візитах до Вашого лікаря.

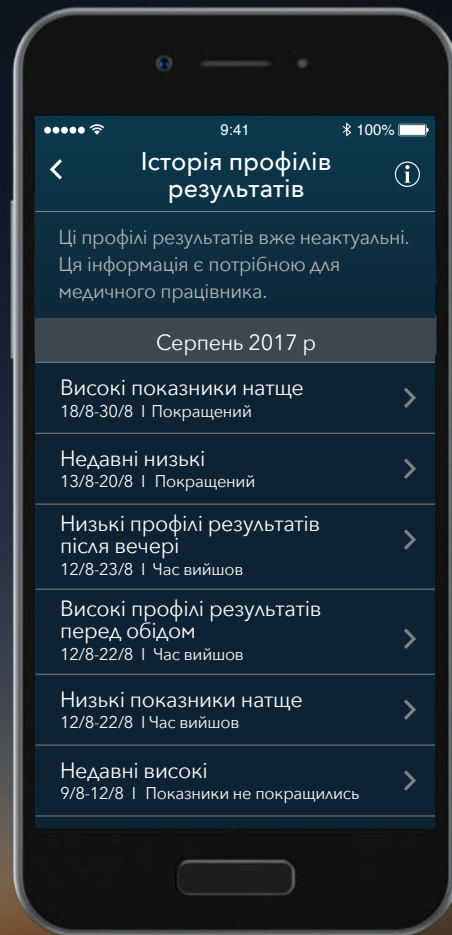

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

Поговоріть з Вашим лікарем та зверніться до посібника користувача, якщо у Вас є питання про глюкометр **CONTOUR®PLUS ONE** або **додаток CONTOUR®DIABETES**.

Щоб отримати більше інформації та дізнатись, чи доступні ці продукти у Вашій країні, завітайте на diabetes.ascensia.com.



Гіпотетичні дані пацієнта виключно з метою демонстрації. Завжди консультуйтеся з Вашим лікарем до того, як змінювати лікування, дієту або фізичну активність.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks herein is under licence. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo and Contour are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Date of preparation: February 2018 Code: G.DC.10.2017.52579

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.

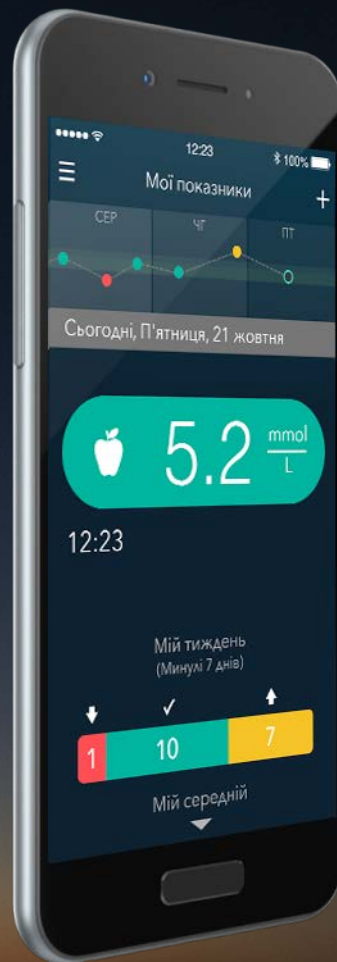

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

